

## Provtagningsanvisning för Clostridioides difficile diagnostik


### Avgränsning/Bakgrund

Metoden som används för detektion av *C.difficile* baseras på en snabb EIA-metod med immunokromatografiskt test. Analysen använder antikroppar som är specifika för glutamathydrogenasantigen och toxinerna A och B för *C.difficile*.

Typning görs ej rutinmässigt. Meddela laboratoriet vid misstanke om vårdrelaterat utbrott eller mycket svår sjukdom då ribotypning kan bli aktuell.

### Provtagning

Använd faecesrör med sked. Analysen kräver **minst 1 ml** flytande faeces, gärna mer. Pinnprov kan inte användas.

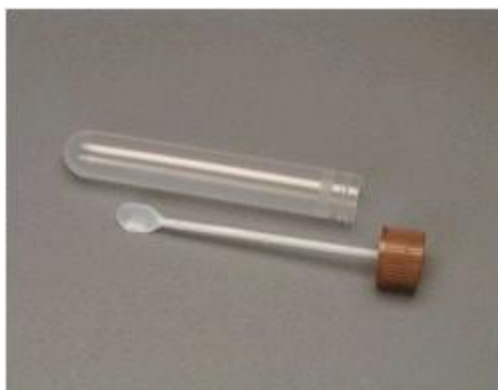

#### Faecesrör med sked.

Används vid frågeställning Clostridioides difficile (toxinpåvisning) respektive vid frågeställning Helicobacter pylori, (antigentest). Förrådsartikel, artikelnr: 1368.

Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

### Ange på remissen

Mycket viktigt att provtagningstiden är korrekt.

Ange på remissen om särskilda indikationer för analysen föreligger ex fekal transplantation.

### I avvaktan på transport

**Förvaras** i kylskåp i avvaktan på transport. Clostridioides difficile-toxintest bör snarast **transporteras** till laboratoriet. Ju längre transport/förvaringstid desto större risk för falskt negativt resultat.

Prov äldre än 3 dygn analyseras ej.

## Svar och bedömning

Analysen för Clostridioides difficile utförs alla dagar.

Prover som inkommer till laboratoriet före kl. 15.30 **måndag** till **fredag** kan slutsvaras samma dag.

Prover som inkommer till laboratoriet före klockan 12.00 **lördagar** och **söndagar** kan slutsvaras samma dag.

Det föreligger betydande risk för nosokomial spridning av Clostridioides difficile, se särskilda anvisningar på vårdhygiens hemsida. Invänta ej svar på beställda mikrobiologiska undersökningar innan isolering genomförs. Rådgör gärna med avdelningen för vårdhygien.

Asymptomatiskt bärarskap av stora mängder bakterier och toxin är vanligare hos barn under två års ålder. Ca 3 % av friska vuxna och ca 10 % av vuxna i slutenvård är bärare av toxinproducerande C difficile.

Vid negativt resultat och fortsatt stark klinisk misstanke rekommenderas kompletterande undersökning med C difficile-PCR. Rådgör gärna med vårdhygienisk expertis.

Prover med mindre provmaterial än 1 ml kan inte analyseras.

Prover bestående av enbart fast/formad faeces kommer ej att analyseras då analys av C. difficile ej är motiverad.

## Faktorer som påverkar svarets kvalitet

- Lång transporttid